


NUEVO


Vivinex Impress™

BE IMPRESSED

NUEVA LIO
MONOFOCAL
PRECARGADA
MEJORADA

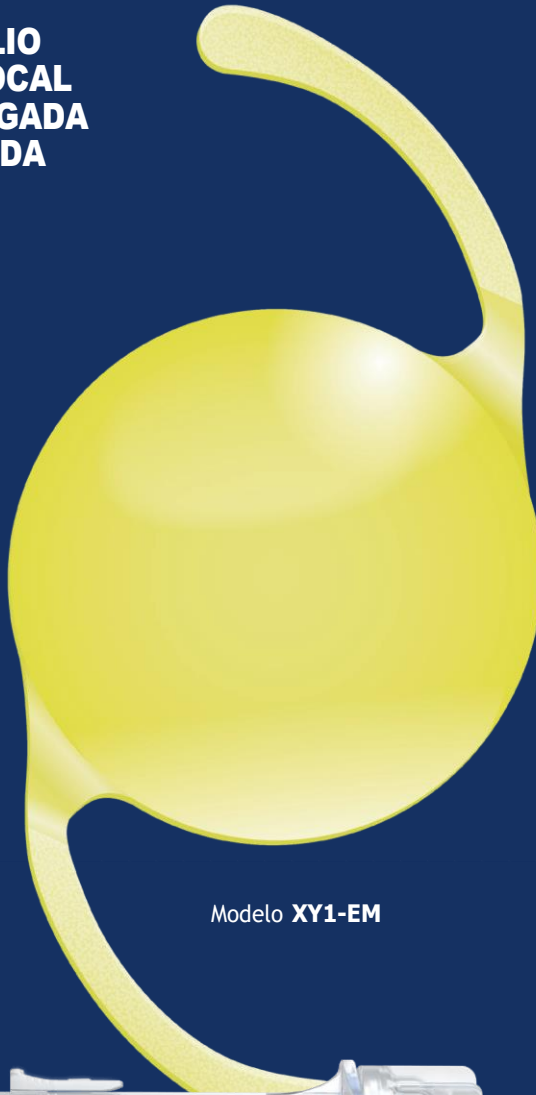

Modelo XY1-EM

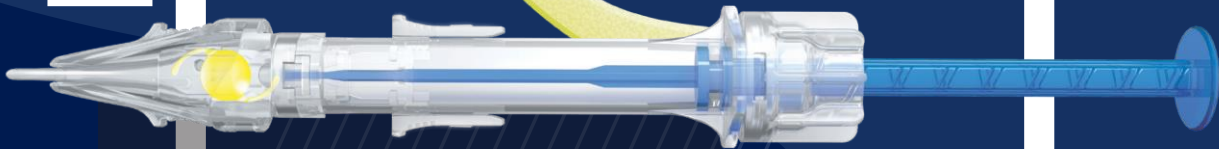


inyector precargado multiSert™



Su acompañante en el restablecimiento de la visión | I

Con nuestro inyector multiSert™

HOYA
SURGICAL OPTICS

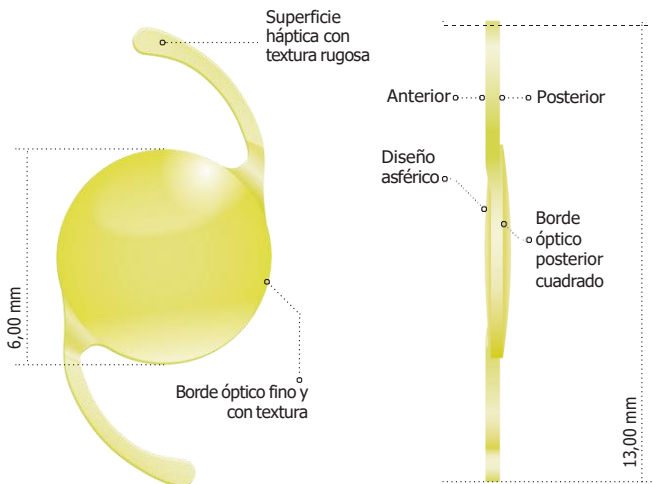

LIO monofocal diseñada para proporcionar una calidad de imagen mejorada con un mayor rango de enfoque

Vivinex Impress™	
Nombre del modelo	XY1-EM
Diseño de la óptica	Biconvexa con borde óptico fino y con textura Anterior: diseño esférico
Materiales ópticos y hápticos	Acrílico hidrofóbico Vivinex™ con filtro de luz azul y UV
Diseño háptico	Superficie háptica con textura rugosa
Diámetro (óptica/LAO)	6,00 mm/13,00 mm
Potencia de la LIO (equivalente esférico)	Entre +6.00 D y +30.00 D en aumentos de 0.50 D
Constante A nominal*	118,8
Inyector	multiSert™ precargado
Diámetro exterior de la punta del inyector frontal	1,70 mm
Tamaño de incisión recomendado	2,20 mm

* La constante A se presenta como un punto de partida para calcular la potencia de la lente.
A la hora de calcular la potencia exacta de la lente, se recomienda realizar los cálculos de forma individual basados en el equipo utilizado y en la propia experiencia del cirujano.

multiSert™



multiSert™ 4 en 1 ofrece un control inigualable con múltiples opciones

Manejo con una mano
Inyección a presión



Manejo con dos manos
Inyección a rosca



Administración dentro del saco capsular
Sin utilizar el protector de inserción



Administración a través de la incisión
Utilizando el protector de inserción avanzado



Su acompañante en el restablecimiento de la visión | Proporcionado por multiSert™

HOYA
SURGICAL OPTICS

CE 0123 2022-04-25_HSOE_XY1-EM_DS_EN

La información contenida está destinada a profesionales sanitarios. Para obtener una lista completa de indicaciones y contraindicaciones, consulte las instrucciones de uso. Algunos de los productos o características específicas y los procedimientos que se especifican en este documento podrían no estar aprobados en su país y, por lo tanto, no estar disponibles. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso como resultado del desarrollo técnico continuo. Póngase en contacto con su distribuidor regional para consultar la disponibilidad en su país. HOYA, Vivinex, Vivinex Impress y multiSert son marcas registradas de HOYA Corporation o sus afiliados. ©2022 HOYA Medical Singapore Pte. Ltd. Todos los derechos reservados.

HOYA Medical Singapore Pte. Ltd | 455A Jalan Ahmad Ibrahim | Singapore 639939 | HOYA Surgical Optics GmbH

De-Saint-Exupéry-Straße 10 | 60549 Frankfurt am Main | Germany

Línea directa DE: Tel. +49 (0)800 664 2 664 | Fax +49 (0)800 774 2 774 **hoyasurgicaloptics.com**